


3dk.berlin Spritzschild Maske v4



Anti-Beschlag




Antibakteriell

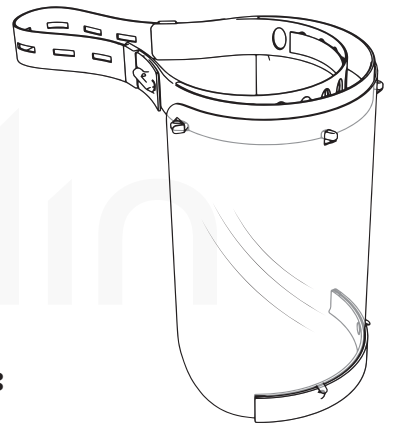

Für deine persönliche Maske benötigst du :
Schere & Lochgummiband

I

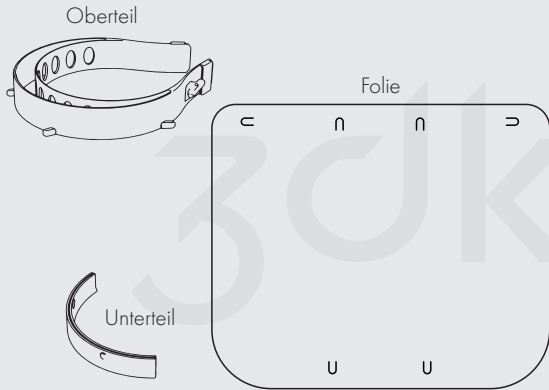

II





Schritt 1

Fädeln Sie die Folie in den oberen und unteren Teil der Maske ein. Die Laschen auf der Oberseite biegen sich nach außen und die der Unterseite verankern sich im Unterteil.

Schritt 2

Nehmen Sie das Knopflochgummiband und befestigen Sie es auf einer Seite. Fädeln Sie das Band durch die Laschen und passen Sie die Länge Ihrer Kopfgröße an. Befestigen Sie es dann auf der anderen Seite.

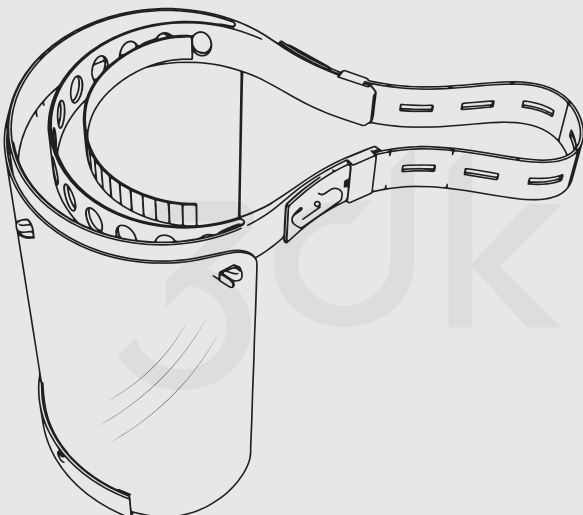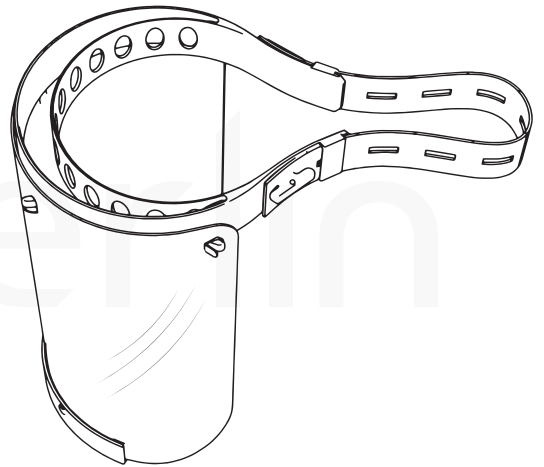

Optional Schritt 3

Sie können, um den Komfort zu erhöhen, in das Stirnband Moosgummi einkleben.



Spritzschild Maske_{V4}

Dies ist keine 100%ige Abschirmung gegen das CoVID19 Virus, es deckt lediglich deine Schleimhäute vor einer direkten Tröpfcheninfektion ab.

Es gilt weiterhin:

**Abstand halten
regelmäßig Händewaschen**

Versammlungen meiden

**Euer 3dk.berlin Team wünscht allen Durchhaltevermögen und hofft auf eine baldige Besserung.
www.3dk.berlin - masken@3dk.berlin - Ruppinerchaussee 325 13503 Berlin - 030 54909613**

BITTE BEACHTEN: Die von uns gelieferten Spritzschild Masken sind während der Produktion nicht desinfiziert worden. Bitte desinfizieren Sie diese bei Bedarf vor erstmaligem Gebrauch.